

EIN NEUER WEG, DAMIT SIE SICH SICHER FÜHLEN

Der Navina Fecal Incontinence Insert ist ein innovativer Einsatz,
um ungewollten Stuhlverlust zu vermeiden.

Navina™

WECHSELN SIE VON SORGEN ZU NEUER HOFFNUNG

Sich in einer Situation wiederzufinden, in der man seinem eigenen Körper nicht mehr vertrauen kann, ist natürlich niederschmetternd. Jeder, der mit Stuhlinkontinenz zu tun hat, weiß, dass sowohl die körperlichen als auch die psychischen Folgen Ihr Leben einschränken und Sie davon abhalten, Dinge zu tun, die Sie gerne machen würden.

Zum Glück gibt es Hilfe.

Wellspect präsentiert eine neue Innovation: den Navina Fecal Incontinence Insert. Ein weicher und glatter Einsatz aus flexiblem Silikon, der für eine vollständige Abdichtung am Rektum sorgt und so einen ungewollten Stuhlverlust verhindert.

Wir bieten eine sofortige Alternative, die hilft, das akute Problem in den Griff zu bekommen - und die Hoffnung auf ein unabhängigeres Leben gibt.



„...Ich komme manchmal an den Punkt, dass ich Angst habe, irgendwohin zu gehen und etwas zu unternehmen, weil mein Darm sich bemerkbar macht, und das ist mir peinlich...“


...Sich die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen zu müssen, macht mich fertig und zehrt an mir.“

Frau mit Rückenmarkverletzung, 47 Jahre¹


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG




1. Halten Sie den gleitmittelbeschichteten Einsatz an der breiten Halterung und richten Sie die Spitze des Einsatzes auf den Anus aus.

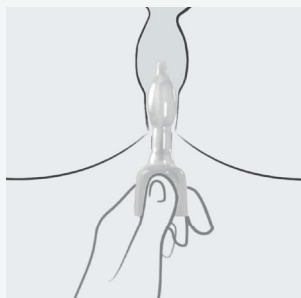

2. Führen Sie den Einsatz vorsichtig ein, bis die breite Halterung am Anus anliegt. Ziehen Sie die Einführhilfe heraus und entsorgen Sie sie im Hausmüll.

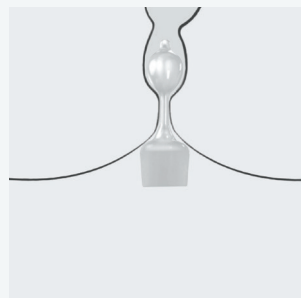

3. Der mit Flüssigkeit gefüllte Einsatz passt sich den Konturen des Körpers an und hilft so, ungewollten Stuhlverlust zu verhindern.

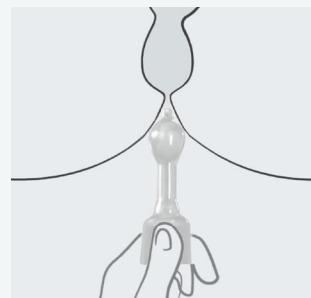

4. Um den Einsatz zu entfernen, fassen Sie an die Halterung, ziehen ihn vorsichtig heraus und entsorgen Sie ihn im Hausmüll.



EIN INNOVATIVES DESIGN FÜR MEHR WOHLBEFINDEN

Der flexible, mit Flüssigkeit gefüllte Einsatz ist so konstruiert, dass er sich durch die Flüssigkeit im Innern anpasst und bewegt. Dies ermöglicht ein einfaches Einführen und Entfernen und bietet einen hohen Tragekomfort. Der Navina Fecal Incontinence Insert ist so konzipiert, dass er einfach in der Handhabung ist, einen ungewollten Stuhlverlust verhindert und ein unabhängiges und aktives Leben ermöglicht.

HYGIENISCH UND ANWENDERFREUNDLICH
Die Einführhilfe gibt dem Einsatz während des Einführens Stabilität und hilft, die Finger sauber zu halten.

FLEXIBILITÄT UND KOMFORT
Der aus weichem Silikon gefertigte und mit geschmeidiger Flüssigkeit gefüllte Einsatz ist sorgfältig verarbeitet, um ein bequemes Einführen zu gewährleisten und sich den Bewegungen anzupassen.

SICHERE POSITIONIERUNG
Die breite Außenhalterung lässt sich bequem zusammendrücken und ist so konstruiert, dass der Einsatz sicher in Position bleibt.

DOPPELTE SICHERHEIT
Zum einen liegt die Halterung am rektalen Schließmuskel an und verhindert so den ungewollten Stuhlverlust. Zum anderen passt sich der Schaft an und füllt den Analkanal aus, wodurch der Druck der Schließmuskeln den Kanal abdichtet und ein Vorbeilaufen von Stuhl verhindert.

KONTAKTIEREN SIE NOCH HEUTE IHREN ARZT.

Der Navina Fecal Incontinence Insert ist ein rezeptierbares Hilfsmittel bei Stuhlinkontinenz. Ihr Arzt kann Ihnen hierfür ein Rezept ausstellen. Da das Thema Stuhlinkontinenz mit einem gesellschaftlichen Stigma behaftet ist, erleichtern Sie sich das Gespräch mit Ihrem Arzt hierzu mit Hilfe dieser Broschüre.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wellspect.de

NAVINA FECAL INCONTINENCE INSERT - BESCHREIBUNG:

Der Fecal Incontinence Insert ist ein weicher, flexibler, mit Flüssigkeit gefüllter Einsatz zur Verhinderung von Stuhlinkontinenz. Er ist nicht steril und nur für den Einmalgebrauch vorgesehen.

ZWECKBESTIMMUNG

Der rektale Einsatz ist zum eigenständigen Einführen gedacht, um den ungewollten Verlust von Stuhl aus dem Rektum zu verhindern.

INDIKATIONEN

Der Einsatz ist für die Behandlung von unbeabsichtigtem Stuhlverlust aufgrund von Stuhlinkontinenz indiziert.

KONTRAINDIKATIONEN

Der Navina Fecal Incontinence Insert ist nicht zur Anwendung bei Kindern geeignet.

Bei Wellspect entwickeln wir innovative Kontinenzlösungen, die das Leben der Menschen verändern. Wir möchten unsere Anwender dazu inspirieren, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu entwickeln. Mit unseren Marken LoFric[®] und Navina[™] sind wir seit über 30 Jahren branchenführend. Wir entwickeln zuverlässige und benutzerfreundliche Produkte für das Blasen- und Darmmanagement mit möglichst geringer Umweltbelastung. Wir sind leidenschaftlich bemüht, klimaneutral zu werden und eng mit Anwendern und Angehörigen der Gesundheitsberufe zusammenzuarbeiten, die uns ständig dazu inspirieren, unsere Produkte und Dienstleistungen jetzt und für die Zukunft auf nachhaltige Weise zu verbessern.

Wellspect. A real difference

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Website. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 2727872
info.de@wellspect.com

[wellspect.de](https://www.wellspect.de)



Schweiz

Tel.: +41 (0) 800 620 240
info-ch@wellspect.com

[wellspect.ch](https://www.wellspect.ch)

Österreich

Tel.: +43 (0) 1214 6150-0
info-at@wellspect.com

[wellspect.at](https://www.wellspect.at)



Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976 USA
507-533-0366
www.mnmedtech.us



Importer: Wellspect HealthCare
(A division of Dentsply IH AB)
Aminogatan 1
PO Box 14
SE-431 21 Mölndal
Sweden
www.wellspect.com



MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germany